



L I F E C O M E S F I R S T

ARCHEON Medical
archeon-medical.com

2 Chemin des Aiguillettes
25000 BESANCON, FRANCE

Tel : +33 (0)3 81 66 23 80
contact@archeon-medical.com

A0000092-Rev01-30NOV2021

EOLifeX


RCP: Addestramento efficace per salvare vite



1.

Collegamento / scollegamento del sensore FlowSense X a EOLife X

- o Inserire la parte con la rientranza nella parte a rilievo del connettore.
- o Premere con decisione il sensore per agganciarlo ai pin del connettore.
- o Si dovrebbe sentire il caratteristico «clic» quando la linguetta del connettore si aggancia e tiene il sensore FlowSense X in posizione.
- o Per non danneggiare il connettore, tirare la linguetta con l'indicatore a freccia per scollegare il sensore FlowSense X dall'alloggiamento di EOLife X.

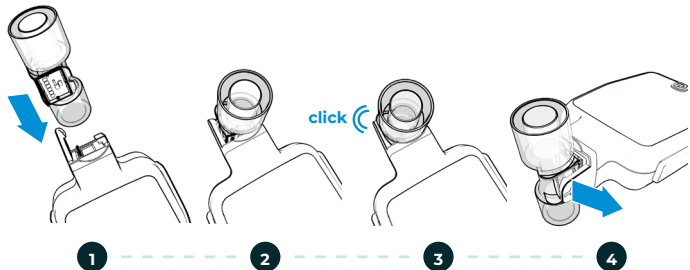

2.

Avviamento di EOLife X

Premere il tasto fisico ON / OFF una volta per accendere EOLife X



3.

Selezione della modalità operativa



4.

Modalità addestramento

Scegliere la modalità di addestramento



5.1

Modalità al buio

- Indicatore di registrazione
- Cliccare su STOP per interrompere la registrazione



5.2

Monitoraggio ventilazione

Interfaccia avanzata

- Feedback in tempo reale
- Vi = volume insufflato
 - Vt = volume corrente
 - Freq. = frequenza ventilazioni

Grafico a barre (Vi in tempo reale)

Area di visualizzazione dei segnali di allarme



Interfaccia base

- Istruzioni di ventilazione
- Grafico a barre (Vi in tempo reale)
- Area di visualizzazione dei segnali di allarme

6.

Report statistico

Registrazione ed esportazione dei dati di ventilazione

Report statistico alla fine della ventilazione



Certificazione normativa

Con la presente ARCHEON dichiara che l'apparecchiatura radio EOLife X è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente link:

Contiene 'ID FCC: SQGBL652
Contiene IC: 3147A-BL652



Per ulteriori informazioni:

- Consultare le istruzioni per l'uso di EOLife X tramite QR Code
- Guarda il video di addestramento sul nostro account Youtube Archeon Medical